


Découvrez comment la technologie révolutionne vos tests de qualité du lait.


**aurox**  
NEXT-GENERATION MILK TESTING

Adoptez l'automatisation  
et portez vos tests antibiotiques  
à un niveau d'excellence inégalé.

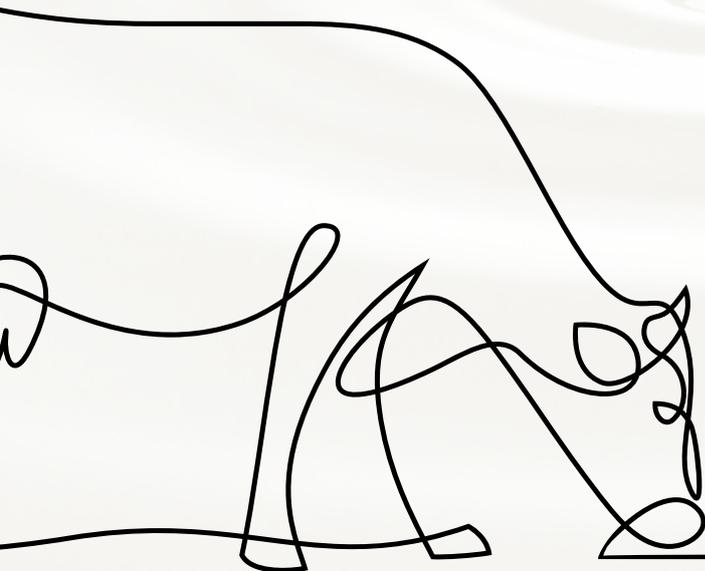

# Plus besoin de pipettes ! Le test du lait simplifié...

1

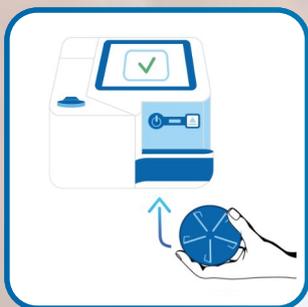

Insérez un disque  
de réactifs

2



Versez le lait  
dans l'entonnoir

3



Démarrez l'analyse et  
obtenez les résultats de  
votre échantillon en  
moins de 3 minutes\*

4



Suivi et gestion des  
résultats et des données  
associées en temps réel



Découvrez l'avenir de la sécurité laitière avec Unisensor - aurox® est le premier système entièrement automatisé alliant tests immunologiques et technologie d'échantillonnage fluide. Il élimine le besoin de formation approfondie et de pipetage, tout en améliorant la robustesse et la répétabilité des tests.

L'aurox® rationalise les opérations laitières en fournissant des données en temps réel et des résultats de tests d'antibiotiques vérifiés, que ce soit lors du transport ou en analyse de laboratoire.



#### Gestion automatisée des échantillons

- Plus besoin de pipetage
- Pas de micro-puits, ni de mélange manuel
- Pas de problème de volume d'échantillon
- Auto-Nettoyage



#### Performance de test élevée

- Haut débit
- Précision
- Reproductibilité



#### Analyse des résultats

- Interprétation numérique des résultats
- Interface conviviale
- Décisions fiables et impartiales



#### Gestion intégrée des données

- Fonctionnement fluide, sans interruption
- Connectivité 4G, Wi-Fi, Ethernet avec surveillance à distance
- Intégration avec la gestion des données Unisensor ou un LIMS (Système de gestion de laboratoire)

L'aurox® DISCB201 détecte

les bêta-lactamines (y compris la céfalexine) et les tétracyclines dans le lait de vache, de chèvre et de brebis, en conformité avec les limites de résidus de l'UE.

- **Test rapide:** Obtenez des résultats pour un échantillon en moins de **3 minutes**.\*
- **Haut débit:** Analysez jusqu'à **6 tests en parallèle** en moins de 5 minutes.\*
- **Format compact:** Conditionné sous forme de disque contenant jusqu'à **12 tests par disque**, pour une manipulation facile et un stockage compact.

\*Temps basé sur des tests avec du lait à température ambiante ; le temps de chargement des échantillons n'est pas inclus.

# ILVO

Validation conforme aux normes industrielles les plus exigeantes en termes de fiabilité et de performance.



Conçu et fabriqué en Belgique.



# Unisensor - Qui sommes-nous ?

## Notre mission

Apporter des solutions de diagnostic intelligentes du laboratoire au terrain.

Nous avons toujours relevé les défis du terrain en innovant avec des solutions de diagnostic avancées et intelligentes qui dépassent les limites traditionnelles des laboratoires.

Grâce à nos technologies inégalées, nous ne cherchons pas simplement à améliorer les produits, nous aspirons à révolutionner les contours de notre industrie.

## Notre vision : Peace Of Mind in Food

La confiance des consommateurs est essentielle pour les producteurs de produits alimentaires. Avec nos solutions d'analyse, nous les aidons à garantir une alimentation de qualité supérieure qui répond aux attentes des consommateurs.



Liège Science Park • Rue Louis Plescia, 8 • 4102 Ougrée (Liège) • Belgium

Phone +32 4 252 66 02 • [info@unisensor.be](mailto:info@unisensor.be) • [www.unisensor.be](http://www.unisensor.be)